

LUV

LÁSER DE USO VETERINARIO



EQUIPO DE TECNOLOGÍA LÁSER

BENEFICIOS

- Propicia la liberación de sustancias químicas.
- Estimula la síntesis proteica y enzima celular.
- Disminución y prevención de la inflamación.
- Efecto bioenergética celular.
- Proporciona activación celular en la zona aplicada.
- Apoyo en la cicatrización de heridas y traumatismo en los diferentes tejidos.
- Reducción y prevención de la edematización.
- Analgesia en la zona de aplicación.

LÁSER TERAPÉUTICO DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA TERRAPIAS EN ANIMALES.




24 meses
de garantía

ACEPTAMOS



*TENEMOS PLANES DE FINANCIAMIENTO

ÁREA DE TRABAJO	INCLUYE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CATEGORIAS
PUNTAL ● 1 cm ²	Consola con pantalla táctil 2 Puntales (Rojo e Infrarrojo) 1 Memoria USB con manuales de uso.	● Modelo: LUV MINI- 1 ● Color del equipo: NEGRO ● Dimensiones del equipo: 27.7cm x 22.2 cm x 4.8cm ● Voltaje: 12V DC 24W	● Animales de compañía ● Animales exóticos ● Aves ● Réptiles ● Equinos ● Animales de granja
MANERAL ● 6cm ²	Par de lentes de protección Cable de conexión corriente		

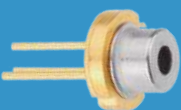

Todos nuestros equipos usan tecnología de Diodo Láser de alta potencia.

MANERALES



PUNTAL ROJO

λ 658nm, potencia de 100mW. Trabajo nivel de la piel estimulando fibroblastos para renovación celular.



PUNTAL INFRARROJO

λ 808nm, potencia de 300mW. Penetración de 5 a 7cm en tejido blando y óseo.

ADITAMENTOS ESPECIALES

*Se venden por separado



MANERAL TRIPOLAR

Cabezal con 3 diodos de 808 nm 300 mW



LÁSER COLIMADO ROJO

λ 658nm, 80 mW. Permiten trabajar a distancia sin perder potencia.



LÁSER COLIMADO AZUL

λ 450nm, 80 mW. Permiten trabajar a distancia sin perder potencia.

INTERFAZ LÁSER DE USO VETERINARIO

ANIMALES DE COMPAÑÍA

LUV

Frecuencia 6.500 Hz

Potencia 50 mW

Tiempo 01.00 Min

Energía 3 J

Dens. energía 3 J/cm²

Área 1 cm²

Energía x seg 3 mJ

Eficiencia 16 %

Patología: Lesiones agudas

Pelaje: Oscuro

COLIMADOS INFRARROJO ROJO TRIPOLAR

Selecciona los diferentes puntales para la mejor aplicación de cada tratamiento

Tiempo, Potencia, Área y Tiempo preprogramados para cada tratamiento.

PROPIEDADES DEL LÁSER



LÁSER ROJO

SUS EFECTOS SE BASAN EN TRANSFORMACIONES BIOQUÍMICAS, DE SÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS Y CADENAS PROTEICAS. ADEMÁS DE LA ESTIMULACIÓN CELULAR, SE OBSERVAN MEJORES EFECTOS EN HERIDAS, QUEMADURAS, ULCERAS Y ESCISIÓN DE PIEL. RECOMENDADO PARA INFLAMACIÓN Y PADECIMIENTOS AGUDOS.



LÁSER AZUL

RECOMENDADO PARA AFECCIONES DERMALES, ESTIMULA LOS PROCESOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFLAMACIÓN Y LA REDUCCIÓN DEL DOLOR, SE ENFOCA EN LOS VASOS SUPERFICIALES PARA EMPEZAR A ACTUAR DESDE ESTOS SIN CAUSAR ALGÚN TIPO DE DAÑO A LA DERMIS.



LÁSER INFRARROJO

EL MÁS RECOMENDADO PARA TERAPIA ANTIÁLGICA, SUS EFECTOS VAN ENFOCADOS HACIA EL APORTE ENERGÉTICO PARA ACELERAR EL METABOLISMO ENERGÉTICO Y DE SÍNTESIS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, Y REPARACIÓN DE LOS TEJIDOS. DESEABLE PARA PADECIMIENTOS AGUDOS Y CRÓNICOS.

24 meses
de garantía

ACEPTAMOS



TENEMOS PLANES DE FINANCIAMIENTO